



ANALIZZATORE CARBONIO / ZOLFO

ELEMENTRAC CS-d

ELEMENTRAC CS-d di ELTRA è l'unico analizzatore sul mercato per la determinazione di carbonio e zolfo in campioni organici e inorganici. A tale scopo, ELEMENTRAC CS-d è dotato sia di un forno a

induzione che di un forno a resistenza (ELTRA Dual Furnace Technology), coprendo così l'intero range d'analisi del carbonio e dello zolfo.

Quattro celle a infrarossi (IR) altamente sensibili consentono la misurazione precisa di alte e basse concentrazioni di carbonio e zolfo in una sola analisi. L'intervallo di misurazione di ciascuna cella può essere adattato alle esigenze specifiche dell'utente per garantire condizioni di misurazione ottimali per ciascuna applicazione.

ELEMENTRAC CS-d viene fornito con il software completo ed intuitivo ELEMENTS.



[Cliccare per visualizzare il video](#)

Video di prodotto

ELEVATA FLESSIBILITÀ GRAZIE AI DUE FORNI

- | Piena flessibilità grazie al forno combinato a induzione e resistenza: tecnologia ELTRA Dual Furnace (EDF)
- | Analisi rapide e accurate di carbonio e zolfo in campioni inorganici e organici
- | Fino a quattro celle a infrarossi indipendenti con flessibili range di misura
- | Il percorso IR in oro consente una maggiore durata della cella per l'analisi di campioni contenenti alogeni o acidi
- | Determinazione simultanea di carbonio e zolfo con preparazione minima del campione
- | Il design robusto consente l'utilizzo nel controllo della produzione e in laboratorio




ANALIZZATORE CARBONIO / ZOLFO ELEMENTRAC CS-D

PROCESSO OPERATIVO E DI ANALISI

Il funzionamento dell'ELEMENTRAC CS-d è facile e conveniente e richiede solo pochi passaggi. Il peso tipico del campione per l'analisi carbonio / zolfo è di circa 50-1000 mg. Questo è sufficiente per rilevare in modo affidabile concentrazioni da 1 ppm a 100%. Prima del processo di combustione è necessario estrarre un campione dalla quantità iniziale (varia fortemente a seconda della matrice). Gli standard internazionali come DIN EN ISO 14284 (Campionamento di acciaio e ferro) forniscono un certo orientamento.

FORNO A INDUZIONE

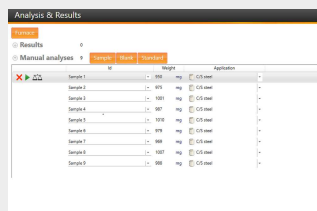

Step 1: registrazione del campione nel software ELEMENTS

L'ID campione viene registrato nel software e il peso viene trasferito automaticamente (vedere il passaggio 2).



Step 2: pesatura e aggiunta di acceleratori

I campioni di volumi da 50 mg a 1000 mg sono tipici per l'analisi C / S. Il campione viene pesato in un crogiolo di ceramica e vengono aggiunti acceleratori come il tungsteno. La geometria del campione (ad es. filo, polvere, spillo, ecc.) non è essenziale per un'analisi affidabile.



Step 3: Analisi


Il crogiolo in ceramica viene quindi posizionato sul piedistallo del CS-d e l'analisi viene avviata tramite il software ELEMENTS. Il software controlla tutte le fasi successive come la combustione e la valutazione.



Step 4: risultati ed esportazione dei dati

45-60 secondi dopo l'inizio dell'analisi, le concentrazioni di carbonio e zolfo misurate sono disponibili per l'esportazione come report o tramite LIMS.

FORNO A RESISTENZA

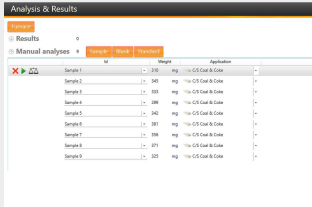

Step 1: registrazione del campione nel software ELEMENTS

L'ID campione viene registrato nel software e il peso viene trasferito automaticamente (vedere il passaggio 2).



Passaggio 2: pesatura del campione

Nel forno a resistenza, i tipici volumi per l'analisi C/S del campione variano da 50 mg a 500 mg. Il campione viene applicato direttamente a una navicella e non è necessario l'utilizzo di acceleratori.



Step 3: Analisi

Il campione viene posto davanti al forno e la misurazione viene avviata nel software. Un LED verde segnala quando il campione può essere introdotto nel forno. Durante la combustione il software ELEMENTS registra continuamente i valori di misura.



Step 4: risultati ed esportazione dei dati


Le concentrazioni di carbonio e zolfo misurate sono disponibili per l'esportazione come rapporto o tramite LIMS da 60 a 240 secondi dopo l'inizio dell'analisi.

ANALIZZATORE CARBONIO / ZOLFO ELEMENTRAC CS-D

CONFIGURAZIONI

L'ELEMENTRAC CS-d è disponibile come analizzatore a elemento singolo per carbonio o zolfo, o in una configurazione per la misurazione simultanea dei due elementi. A tale scopo utilizza fino a quattro celle IR che possono essere adattate alle esigenze individuali. All'aumentare della lunghezza della cuvetta, aumenta anche la sensibilità per basse concentrazioni (ad es. 10 ppm). Le celle più corte possono ancora misurare campioni con livelli bassi nell'intervallo ppm, ma la deviazione standard dei valori misurati aumenta in modo significativo. Per una misurazione ottimale di alte e basse concentrazioni, si consiglia quindi di utilizzare due celle IR per elemento. La più recente tecnologia di rilevamento consente un ampio campo di misura per carbonio e zolfo dal range ppm fino al 100% sia in forni a induzione che a resistenza. Inoltre, le cuvette d'oro offrono una maggiore affidabilità per l'analisi elementare di campioni contenenti alogeni. Un'opzione speciale per ELEMENTRAC CS-d consiste in una trappola alogena per legare in modo affidabile anche concentrazioni molto elevate di alogeni. L'analizzatore di carbonio / zolfo può essere fornito anche in una configurazione speciale per l'analisi del cemento.

Celle a infrarossi con campo di misura variabile

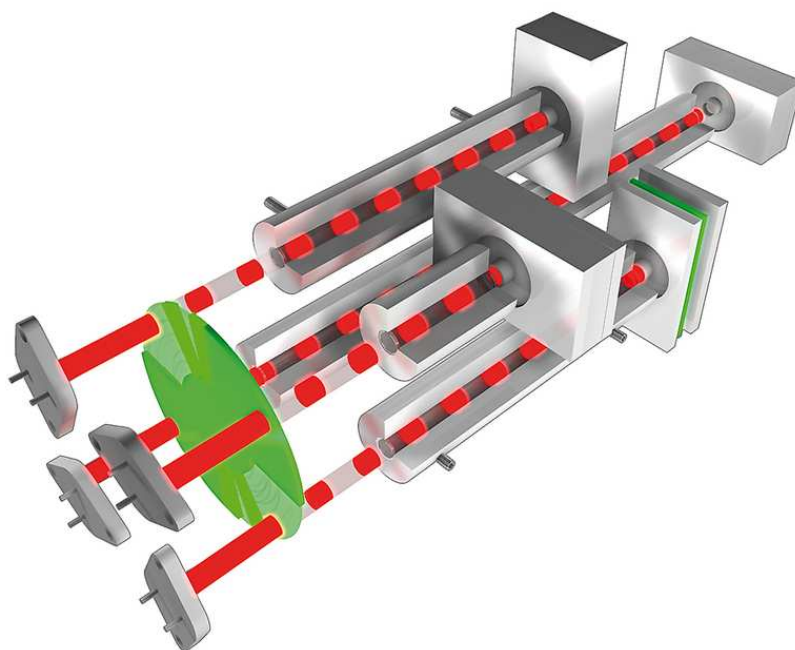

ANALIZZATORE CARBONIO / ZOLFO ELEMENTRAC CS-D

SOLUZIONI STANDARD INTEGRATE


ELEMENTRAC CS-d offre soluzioni intelligenti come caratteristiche standard per fornire misurazioni accurate e affidabili delle concentrazioni di carbonio e zolfo anche in campioni complessi:

Gestione intelligente della lancia

A causa delle alte temperature nel forno a induzione > di 2000 ° C e dell'elevato flusso di ossigeno di 180 L/ ora, i campioni solidi vengono completamente decomposti, consentendo la determinazione del contenuto di C / S con l'ausilio delle celle di misurazione a infrarossi. La combustione completa garantisce risultati di misurazione affidabili.

Poiché i campioni di polvere potrebbero schizzare fuori dal crogiolo portando a risultati inferiori al valore effettivo, il CS-d è dotato di una lancia intelligente e di un sistema di gestione della combustione per garantire una combustione completa senza perdite di parti del campione.

A tale scopo, il flusso di ossigeno da dosare può essere applicato tramite una lancia o la camera per consentire una combustione controllata. La funzione di rampa del forno a induzione consente un processo di combustione delicato mediante l'aumento graduale della potenza.

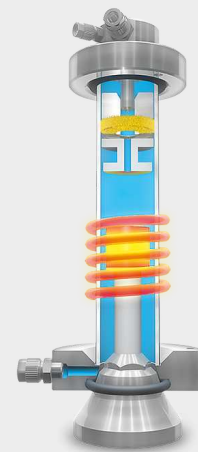

Porta campione nel forno a resistenza (riduzione del valore vuoto)

L'ELEMENTRAC CS-d fornisce analisi accurate e affidabili di campioni a basso contenuto di carbonio nel forno a resistenza. Grazie alla geometria ottimizzata della porta del campione con diametro ridotto e flusso di ossigeno all'ingresso del campione, il valore vuoto di CO₂ dell'atmosfera viene drasticamente ridotto quando viene introdotto il campione, il che consente risultati affidabili nel basso range di misurazione.



ANALIZZATORE CARBONIO / ZOLFO ELEMENTRAC CS-D

OPZIONI

Oltre alle caratteristiche integrate dell'ELEMENTRAC CS-d, sono disponibili ulteriori opzioni per aumentare l'efficienza della misurazione del carbonio / zolfo.


AUTOCAMPIONATORE

Il forno a induzione dell'ELEMENTRAC CS-d può essere dotato di un caricatore automatico di campioni opzionale. Il modulo standard offre 36 posizioni per i crogioli, il modello XL dispone anche di 130 posizioni per crogioli ed è il più grande caricatore automatico disponibile sul mercato per questa tipologia di applicazione.



[Cliccare per visualizzare il video](#)



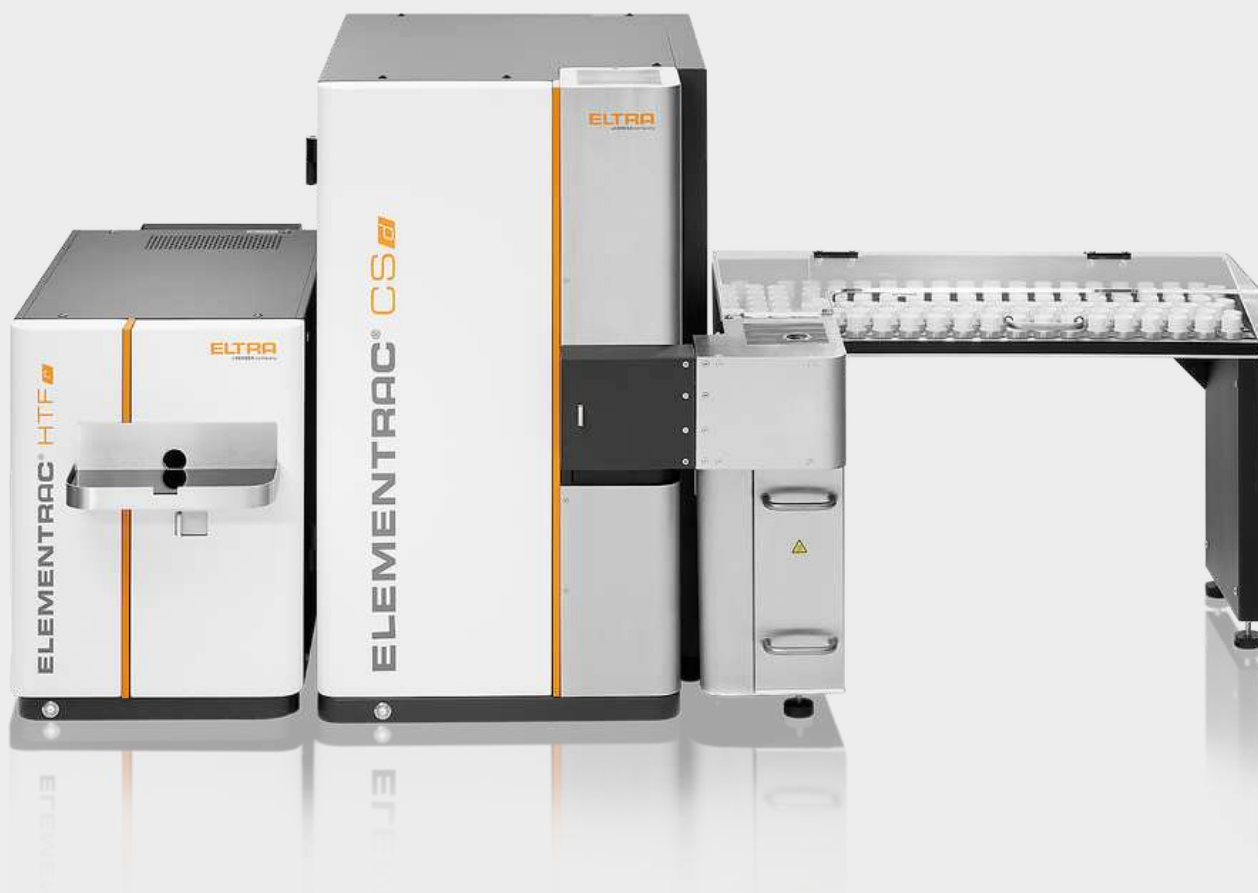



MODULO TIC


Il carbonio può essere determinato come carbonio totale (TC) o in frazioni, i. e. carbonio organico totale (TOC) o carbonio inorganico totale (TIC). Quando combinato con il CS-d, il modulo TIC di ELTRA misura il contenuto di TIC (ad es. Calce) mediante l'acidificazione di prodotti come il suolo o i materiali da costruzione.



IOT - INTERNET OF THINGS

THE PLATFORM FOR REMOTE ACCESS TO YOUR DEVICES

Tutti gli analizzatori ELTRA si integrano perfettamente con la piattaforma IoT di Verder Scientific, fornendo funzionalità avanzate, connettività continua e ulteriori vantaggi:

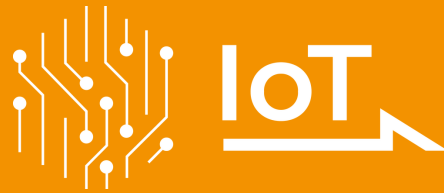

- | **Monitoraggio in tempo reale:** Ottenete una visione dello stato delle vostre macchine in qualsiasi momento grazie all'accesso immediato a dati importanti.
- | **Notifiche in tempo reale:** Rimanete aggiornati sullo stato dei vostri dispositivi con notifiche istantanee.
- | **Backup senza sforzo:** eseguite il backup dei dati in modo semplice e riducete al minimo i tempi di inattività, sia su singoli che su molteplici dispositivi.
- | **Aggiornamenti software automatici:** Verder Scientific IoT mantiene aggiornato il software del dispositivo, ottimizzando le prestazioni e l'affidabilità.
- | **Accesso ai dati di analisi:** Gli analizzatori ELTRA offrono accesso remoto ai dati di analisi. Ciò consente di accedere comodamente ai dati importanti anche quando si è in viaggio.
- | **Efficienza del caricatore automatico:** Ottenete il massimo dalla preparazione delle analisi in remoto con la nostra funzione di autoloader, che garantisce un funzionamento ininterrotto e una maggiore produttività per tutti gli strumenti che ne sono dotati.

Provate oggi stesso la potenza della piattaforma IoT di Verder Scientific e sbloccate il pieno potenziale dei vostri analizzatori ELTRA!



**FREE SOFTWARE
DOWNLOAD**

ANALIZZATORE CARBONIO / ZOLFO ELEMENTRAC CS-D

SOFTWARE ELEMENTS

Il software ELEMENTS, basato sul sistema operativo di Windows, è un accessorio essenziale per tutti gli analizzatori elementari di generazione ELEMENTRAC.

La schermata centrale (analisi e risultati) è il punto di partenza da cui si accede facilmente a tutte le funzionalità richieste per la routine quotidiana. Da tale schermata è possibile raggruppare ed esportare i campioni analizzati o registrare ed analizzare nuovi campioni. L'utente può inoltre attivare varie funzionalità subordinate come la calibrazione, la diagnosi o lo stato e le modifiche all'impostazione dell'applicazione.




ANALIZZATORE CARBONIO / ZOLFO ELEMENTRAC CS-D

CAMPIONI TIPICI

leghe, ceneri, carburi, ghisa, cemento, ceramica, carbone, carbone fossile, rame, vetro, pietra da gesso, ferro, argilla, metalli, minerali, olio, minerale, materiali vegetali, metalli refrattari, gomma, sabbia, terra, acciaio, titanio, tabacco, ...



carbone

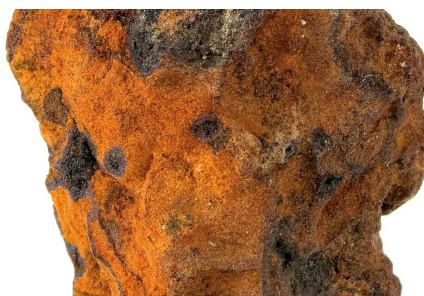

minerale



acciaio

ANALIZZATORE CARBONIO / ZOLFO ELEMENTRAC CS-D

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Indipendentemente dal forno utilizzato nell'ELEMENTRAC CS-d, durante la combustione il carbonio e lo zolfo del campione formano molecole gassose come SO_2 e CO_2 . Le quantità rilasciate di CO_2 e SO_2 vengono misurate in 4 celle a infrarossi selettive per elementi. Di solito, due celle IR vengono utilizzate per misurare un singolo gas (CO_2 o SO_2) per garantire che sia le concentrazioni molto basse che quelle molto alte vengano analizzate in modo preciso e corretto. Quando viene utilizzato il forno a induzione del CS-d, il gas di trasporto (ossigeno) e i prodotti della combustione (CO_2 , tracce di CO e SO_2) vengono prima fatti passare attraverso un filtro metallico che rimuove tutte le particelle solide. Successivamente, un tubo riempito di perclorato di magnesio rimuove le tracce di acqua. Il gas di combustione essiccato passa quindi in due celle a infrarossi per la misurazione dello zolfo (SO_2). Successivamente, un catalizzatore riscaldato (solitamente silice platinata) ossida le tracce di monossido di carbonio (CO) a CO_2 e le molecole di SO_2 a SO_3 . Il gas SO_3 viene assorbito dalla cellulosa e la CO_2 viene misurata in un massimo di due celle IR selettive. Infine, il gas di combustione viene condotto allo scarico e il software ELEMENTS calcola le concentrazioni di carbonio e zolfo risultanti.

Mentre il forno a induzione dell'ELEMENTRAC CS-d è adatto per analizzare campioni inorganici come acciaio, ghisa e ceramica, il forno a resistenza viene utilizzato per la combustione di campioni organici come carbone, coke o terra. Quando un campione di carbone viene bruciato a temperature di ca.



1350 ° C, vengono rilasciati CO₂ e SO₂ ma normalmente non si forma monossido di carbonio (CO). I gas di combustione del forno a resistenza passano prima per un filtro ceramico per l'assorbimento delle particelle, seguito da un tubo di vetro con perclorato di magnesio.

Dopodiché i gas di combustione essiccati percorrono lo stesso percorso di quelli provenienti dal forno a induzione. Di solito, il forno del catalizzatore viene spento durante l'uso del forno a resistenza in quanto non viene richiesta l'ossidazione del CO.

Tuttavia, il rischio di combustione incompleta e di formazione di monossido di carbonio aumenta a temperature inferiori (~ 600°C); in tali casi si può accendere il forno catalizzatore.

ANALIZZATORE CARBONIO / ZOLFO ELEMENTRAC CS-D

CARATTERISTICHE

Elementi misurati	carbonio, zolfo
Campioni	inorganico, organico
Allineamento fornace	orizzontale fornace a resistenza)e verticale (fornace ad induzione)
Contenitore per campione	navicelle/crogioli in ceramica
Campo di applicazione	Ferro / Metallurgie, agricoltura, carbone/energia, chimico/ plastico, geologia/mineralogia, ingegneria/elettronica, materiali da costruzione, medicine/farmaci, riciclaggio/ ambientale, vetro/ceramica
Fornaci	forno ad induzione, al di sopra di 2.000 C // forno a resistenza (tubo in ceramica), regolabile fino a 1.550 C (step di 1 C)
Metodo di rivelazione	assorbimento infrarosso allo stato solido
Numero di celle - IR	1 - 4
Materiale del cammino ottico IR	oro
Tipico tempo di analisi	fornace ad induzione 40 - 50 s fornace a resistenza 60 - 120 s
Reagenti richiesti	idrossido di sodio, perclorato di magnesio, silice platinata (in alternativa ossido di rame)
Gas Richiesti	aria compressa (4 - 6 bar / 60 - 90 psi) ossigeno 99.5 % purezza (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)
Requisiti elettrici per fornace induzione	230 V, 50/60 Hz, fusibile 16 A
Requisiti elettrici per fornace a resistenza	230 V, 50/60 Hz, fusibile 20 A
Dimensioni (L x A x P)	89 x 84 x 79 cm
Peso	~ 200 kg
Attrezzatura richiesta	PC, monitor, bilancia (risoluzione 0.0001g)
Accessori opzionali	Caricatore automatico per 36 crogioli, caricatore automatico per 130 crogioli, forno di preriscaldamento HTF-540, purificazione del gas di trasporto, trappola per alogeni

www.eltra.com/cs-d

ARTICOLI

ELTRA CS-D

(Si prega di ordinare separatamente PC, monitor, bilancia e materiali di consumo (kit di base, anidrone, idrossido di sodio, catalizzatore Pt / Si))

Range di misurazione con un peso del campione di 1000 mg (forno a induzione) || peso del campione di 350 mg (forno a resistenza) 2)
(ulteriori combinazioni di range di misura sono disponibili su richiesta)

forno a induzione || forno a resistenza

88200-1211		CS-d	2xC	0.0001 – 7 % C		0.004 – 62.8 % C
88200-1212		CS-d	2xS	0.00006 – 2.3 % S		0.001 – 31.4 % S
88200-1233		CS-d	2xC 2xS	0.0001 – 7 % C 0.00006 – 2.3 % S		0.004 – 62.8 % C 0.001 – 31.4 % S

Ogni configurazione può essere dotata di un autocampionatore automatico per il forno a induzione.
Non è necessario acquistare alcuna configurazione speciale "predisposta per l'autocampionatore automatico".

ACCESSORI RICHIESTI

PC, MONITOR, BILANCIA

71015-1000 Computer con processore Intel Core i5-8400, 256 GB SSD; 8 GB RAM;
Sistema operativo Windows 10; tastiera; mouse

88400-0584 Monitor, TFT (23.8")

88400-0645 Bilancia (risoluzione 0.0001 g)

MATERIALI DI CONSUMO / PRODOTTI CHIMICI NECESSARI PER LE PRIME OPERAZIONI

88500-0002 Starter kit per 1.000 analisi
(500 crogioli, 2.500 g di tungsteno, 908 g di acceleratore di ferro puro, 50 g di lana di vetro, 50 g di cellulosa, 50 g di lana di quarzo, 50 navicelle riutilizzabili, 500 navicelle di porcellana usa e getta, 100 g Combsolid)

90200  Anidrone (magnesio perclorato), 454 g l)

90210  Idrossido di sodio, 500 g 1)

88400-0535 Pt/Si catalizzatore, 15 g

88600-0021 Filo di ossido di rame (0,5 * 2 mm), 100 g (può essere utilizzato in alternativa al catalizzatore Pt / Si) 1)

ULTERIORI OPZIONI E MATERIALI DI CONSUMO

ACCESSORI (HARDWARE)

72070 Regolatore di ossigeno

88200-9000 Forno di purificazione del gas di trasporto, senza riempimento (ordinare separatamente il riempimento e la lana di quarzo)

88400-0122  Riempimento per forno di purificazione del gas di trasporto (CS)

88400-0610 Scanner di codici a barre

88200-3800  Modulo TIC

88200-1400 Autocampionatore (36 posizioni) per forno a induzione

88200-1500  Autocampionatore (130 posizioni) per forno a induzione

88600-0018  CS-i vacuum cleaner (with HEPA filter)

88600-0020 Trappola alogena CS-i / CS-d

CROGIOLI E COPERCHI PER IL FORNO A COMBUSTIONE

90149  Crogioli in ceramica, premium, Ø 1 ", avvolti in pellicola, 1.000 pezzi

90148  Crogioli ceramici, premium, Ø 1 ", in sacchetti, 1.000 pezzi

88400-0176 Crogioli filtranti ceramici, 100 pezzi

88600-0014  Coperchi in ceramica, foro 10 mm, 250 pezzi

88600-0017 Coperchi in ceramica, foro 4 mm, 1000 pezzi

NAVICELLE PER IL FORNO A RESISTENZA

90153		Navicelle in ceramica riutilizzabili, premium, 58x22x14 mm, 500 pezzi
90160		Navicelle in porcellana usa e getta, 86 x 13 x 10 mm, 1000 pezzi
88600-0011		Navicelle in ceramica riutilizzabili, 95 x 13 x 10 mm, 500 pezzi
88400-0502		Navicella in inconel riutilizzabile, 54 x 18 x 13,5 mm, 1 pezzo
88400-0503		Navicella in inconel riutilizzabile, 54 x 18 x 9 mm, 1 pezzo

ACCELERATORI PER IL FORNO A INDUZIONE

90220		Tungsteno, premium, 2,500 g
90260		Acceleratore ferro, premium, 908 g
88600-0013		Acceleratore di ferro, alta purezza, 454 g
88600-0010		Acceleratore Eltracell tungsteno-stagno, 750 g
90280		Acceleratore stagno, 908 g
90240		Acceleratore rame, 1392 g

SUPPORTO ALLA COMBUSTIONE PER IL FORNO A RESISTENZA

90840		Sabbia di quarzo, 100 g
88600-0008		Combsolid, 100 g

PRODOTTI CHIMICI

90200		Anidrone (magnesio perclorato), 454 g 1)
90210		Idrossido di sodio, 500 g 1)
88400-0535		Catalizzatore Pt/Si, 15 g
90331		Lana di vetro, 454 g
90340		Cellulosa, 100 g
90341		Cellulosa, 50 g
90330		Lana di quarzo, 50 g
92610		Tubetto di grasso per alto vuoto, 35 g
88400-0122		Riempimento per forno di purificazione del gas di trasporto
91000-1005		Rame, fiocchi, 25 g
88400-0508		Lana d'acciaio, 454 g
88600-0021		Filo di ossido di rame (0,5 * 2 mm), 100 g (può essere utilizzato in alternativa al catalizzatore Pt / Si)

STRUMENTI E ACCESSORI GENERALI

23110		Spatola, 1 pezzo, Misura M
23111		Spatola, 1 pezzo, Misura L
23113		Cucchiaino, 1 pezzo, per il dosaggio dei campioni e acceleratore nella serie CS
90145		Pinze per crogioli e navicelle in ceramica, 220 mm 1 pezzo

88400-0229		Pinzette (160 mm), curve, 1 pezzo
88400-0472		Pinzette (145 mm), rette, 1 pezzo
88400-0475		Set con 6 spatole e 1 pinzetta per molteplici procedure di pesatura
88400-0476		Micro spatola, 1 pezzo, taglia XS, per il riempimento di piccole capsule

STRUMENTI PER LO STOCCAGGIO, IL TRASPORTO E LA PESATURA

36121		Navicella in quarzo, 74 x 22 x 10 mm, 1 pezzo, per la pesata dei pins
71010		Spazzola, 16 mm, 1 pezzo, per la pulizia della bilancia dalla polvere
88400-0477		Navicella di pesatura, 1 pezzo, per la pesatura e l'utilizzo di granulati
88600-0015		Supporto crogiolo, per lo stoccaggio di crogioli

ARTICOLI PER LA MANUTENZIONE

51200-8000		Maintenance kit CS-d
88400-0473		Imbuto per polveri (plastica), 1 pezzo, per un facile riempimento di tubi chimici
88400-0489		Tappo in gomma 14 x 20 x 24 mm, 1 pezzo, per sigillare piccoli tubi di vetro come 88400-0006
88400-0490		Tappo in gomma 29 x 35 x 30 mm, 1 pezzo, per sigillare tubi di vetro di grandi dimensioni come 09090
88600-0026		Anhydrone filter tube
88600-0027		Sodium hydroxide, Anhydrone filter tube

UTENSILI PER ANALIZZATORI CS

36216-2001		Stick per l'inserimento della navicella di combustione, 1 pezzo (solo per CS-d)
------------	--	---

36218-2001		Stick per la rimozione della navicella di combustione, 1 pezzo (solo per CS-d)
88400-0332		Barra filettata M4x150, 1 pezzo, per rimuovere il portafiltro in carta
88400-0499		Occhiali di sicurezza, 1 pezzo, protezione quando si lavora con forno caldo
88600-0009		Vetro con protezione bordi, 1 pezzo, protezione quando si lavora con forno caldo

MATERIALI PER LA CALIBRAZIONE

I materiali di calibrazione possono presentare lievi variazioni a seconda del lotto corrente. Per vedere l'attuale certificazione visitare il sito www.ELTRA.com.

ACCIAIO E GHISA

92400-3020  Acciaio, 150 g, 0.001 – 0.01 % C Details

92400-3030  Acciaio, 150 g, 0.01 – 0.05 % C Details

92400-3050  Acciaio, 150 g, 0.1 – 0.2 % C Details

92400-3060  Acciaio, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details

92400-3061 Acciaio, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details

92400-3062 Acciaio, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details

92400-3070  Acciaio, 150 g, 0.5 – 1.0 % C Details

92400-3090  Ghisa, 150 g, 2.0 – 3.0 % C Details

92400-3091 Ghisa, 150 g, 2.0 – 3.0 % C Details

92400-3100  Ghisa, 150 g, 3.0 – 5.0 % C Details

92400-3101 Ghisa, 150 g, 3.0 – 5.0 % C Details

92400-3102 Ghisa, 150 g, 3.0 – 5.0 % C Details

92400-4005 Acciaio, 150 g, ~0.05 % S Details

92400-4010	Acciaio, 150 g, ~0.1 % S Details
92400-4020	Acciaio, 150 g, ~3 % S Details

PINS IN ACCIAIO	DETAILS
92500-1001	Pins per C/S, 454 g, ~0.2 %~C Details
92500-1002	Pins per C/S, 454 g, ~0.4 %~C Details
92500-1003	Pins per C/S, 454 g, ~0.8 %~C Details
92500-2001	Pins per C/S, 454 g, ~0.2 % S Details

CARBURO DI TUNGSTENO

90816-3001	 Carbuero di tungsteno, 100 g, ~6,1 % C
------------	--

ALTRO MATERIALE DI CALIBRAZIONE ADATTO PER FORNO A RESISTENZA E AD INDUZIONE

90812-3001	 Calcare, 25 g, 0.04 % S
------------	---

90812-3002	 Calcare, 25 g, 0.4 % S
------------	--

90812-3003	Calcare, 25 g, < 5 % C
------------	------------------------

90812-3004	Calcare, 25 g, 5 – 10 % C
------------	---------------------------

90817-3001	Terreno, 25 g, > 2 % C, S
------------	---------------------------

90817-3002	Terreno, 25 g, < 1 % C, S
------------	---------------------------

90817-3003	Terreno, 25 g, > 2 % C, S
------------	---------------------------

90817-3004	Terreno, 25 g, < 2 % C, < 1 % S
------------	---------------------------------

91900-1001	 Minerali, 30 g, ~1.4 % S
------------	--

91900-1002	 Minerali, 30 g, ~4.2 % S
------------	--

91900-1003	Minerali, 30 g, ~3 % S
------------	------------------------

91900-2001	Solfuro di zinco, 50 g, 32 % S
------------	--------------------------------

90810	 Carbonato di calcio, 100 g
-------	--

90821



Solfato di bario, 50 g

ALTRO MATERIALE DI CALIBRAZIONE ADATTO SOLO PER FORNI A RESISTENZA

90710-3010



EDTA, 50 g

90710-3030

Saccarosio, 50 g

90824



Acido solfanilico, 50 g

92511-3005

Carbone, 50 g, < 0.1 % S

92511-3010



Carbone, 50 g, 0.1 – 0.5 % S

92511-3020



Carbone, 50 g, 0.5 – 1.0 % S

92511-3030



Carbone, 50 g, 1.0 – 1.5 % S

92511-3040



Carbone, 50 g, 1.5 – 2.0 % S

92511-3050



Carbone, 50 g, 2.0 – 3.0 % S

92511-3060



Carbone, 50 g, 3.0 – 4.0 % S

92511-3070



Carbone, 50 g, 4.0 – 5.0 % S

92511-3080



Carbone, 50 g, >5.0 % S

CARBONE, PREMIUM, C / H / N / S, CENERI, CONTENUTO VOLATILE, CERTIFICATO

92550-3010

Carbone, premium, 50 g, < 1.0 % S

92550-3020



Carbone, premium, 50 g, ~ 1 % S

92550-3040



Carbone, premium, 50 g, 1.0 – 3.0 % S

92550-3060



Carbone, premium, 50 g, > 3.0 % S

COKE, PREMIUM, C / H / N / S, CENERI, CONTENUTO VOLATILE, CERTIFICATO

92560-3010



Coke, premium, 50 g

COKE DI PETROLIO, PREMIUM, C / H / N / S, CENERI, CONTENUTO VOLATILE, CERTIFICATO

92570-3020

Coke di petrolio, premium, 50 g, ~ 1 % S

92570-3040

Coke di petrolio, premium, 50 g, ~ 1 % S

RICAMBI ELTRA CS-D

PARTE FRONTALE DEL FORNO AD INDUZIONE

11093

Piastra filtrante, 1 pezzo

11105



Filtro antipolvere in metallo

11120



Portafiltro in carta

11170



Filtro Balston

11185



Filtro in carta (set di 10)

27000-3070

Illuminazione forno

51100-2035

Cartuccia filtro antipolvere riscaldata

51100-2040

Collegamento trappola per polvere

51200-8000

Maintenance kit CS-d

70230

O-ring 9 x 3 mm

88400-0005

Tubo reagente

88400-0006



Tubo reagente

88400-0332



Barra filettata M4 x 150, 1 pezzo

FORNO AD INDUZIONE DI CS-D

14021		Dispositivo completo di bloccaggio superiore del forno
14045		Spazzola per la pulizia del tubo di combustione
14051		Portaspazzole
14072		Scudo termico in ceramica per spazzola
14130		Tubo di combustione
14168		Piedistallo
70120		O-ring 3.4 x 1.9
70380		O-ring 35 x 5 mm (sono necessari 2 pezzi per il tubo di combustione)
70390		O-ring 38 x 5 mm
		Forno catalitico
66500-0084		Clip per tubo
70180		O-ring 8 x 1.5 mm per forno catalitico
70200		O-ring
70230		O-ring 9 x 3 mm
88400-0422		Tubo reagente 240 x 20 mm
88400-0452		Tubo in quarzo

FORNO A RESISTENZA

089330034		Vite M4 x 20
09090		Reagent tube 32 x 280 mm
11170		Filtro Balston

36720-2001		Tubo in PTFE
70150		O-ring 6 x 2.5 mm
70320		O-ring 20 x 5 mm
73030		Viton tube 4 x 1
36000-3014		Vetroceramica
36000-8000		Elementi riscaldanti incl. contatto
36101		Boat stop
36216-2001		Stick per l'inserimento della navicella di combustione, 1 pezzo (solo per CS-d)
36218-2001		Stick per la rimozione della navicella di combustione, 1 pezzo (solo per CS-d)
36620-2001		Alloggiamento polvere completo
36665		Molla
66100-0329		Vite
66300-0465		Termostato
70380		O-ring 35 x 5 mm
70410		O-ring 48 x 3 mm, Viton
77505		Distanziatore in ceramica per resistenze
90162		Tubo di combustione 35 x 28 x 550 mm