



ANALIZZATORE OSSIGENO / IDROGENO

ELEMENTRAC OH-p

Il nuovo ELEMENTRAC OH-p è un potente e robusto analizzatore elementare per la misura delle concentrazioni di ossigeno e idrogeno in campioni inorganici come acciaio, ferro, rame o ceramica. I rilevatori NDIR e di conducibilità termica ad alta sensibilità rilevano in modo affidabile le concentrazioni di elementi dal basso contenuto di ppm a percentuali elevate.

L'innovativo sistema di porta del campione con risciacquo della camera pulsato e caduta verticale del campione consente un'analisi comoda e intuitiva di campioni astiformi, granulari o polverosi con un peso fino a 2 grammi.

L'analizzatore elementare ELEMENTRAC OH-p soddisfa e supera i requisiti di tutti gli standard internazionali come ASTM E 1019 o DIN EN 3976.



[Cliccare per visualizzare il video](#)

Video di prodotto


ANALIZZATORE OSSIGENO / IDROGENO ELEMENTRAC OH- P

- | Basso consumo di gas e alta sensibilità grazie al sistema di gas chiuso
- | Facile applicazione di pins, polveri e granuli
- | Argon economico come possibile gas di trasporto
- | Breve tempo di analisi
- | Potente forno a impulsi da 8,5 kW
- | Autocleaner opzionale
- | Affidabile analisi elementare OH di materiali inorganici come acciaio, metalli non ferrosi, ceramica, scorie, minerali, ecc.

ELTRA

ANALIZZATORE OSSIGENO / IDROGENO ELEMENTRAC OH-P

PROCESSO OPERATIVO E DI ANALISI

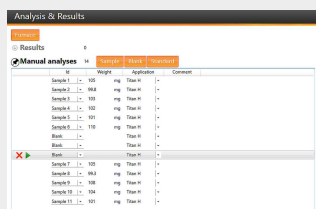

Passaggio 1: registrazione del campione nel software ELEMENTS

L'ID campione viene registrato nel software e il peso viene trasferito automaticamente (vedere il passaggio 2).

Passaggio 2: pesatura e introduzione del campione nella porta

ELEMENTRAC OH-p analizza volumi da pochi mg fino a 2 grammi in modo sicuro e preciso. Possono essere applicati direttamente campioni astiformi o granulari. Per l'analisi elementare delle polveri, si consiglia una capsula che non deve essere sigillata.

Step 3: Analisi

Il crogiolo di grafite vuoto viene quindi posizionato sull'elettrodo inferiore e l'analisi elementare viene avviata tramite il software ELEMENTS. Il software controlla tutte le fasi successive del processo.

Passaggio 4: output ed esportazione dei dati


Da 120 a 180 secondi dopo l'inizio dell'analisi, le concentrazioni misurate sono disponibili per l'esportazione come report o tramite LIMS.

ANALIZZATORE OSSIGENO / IDROGENO ELEMENTRAC OH-P


CONFIGURAZIONI

L'ELEMENTRAC OH-p è disponibile come analizzatore a singolo elemento per solo ossigeno o idrogeno o in una configurazione multi-elemento per la misurazione di OH. Mentre l'ossigeno è determinato come CO₂ in un massimo di due celle a infrarossi, l'azoto e l'idrogeno vengono rilevati nella loro forma elementare in una cella di conducibilità termica.

CUVETTE A LUNGHEZZA VARIABILE

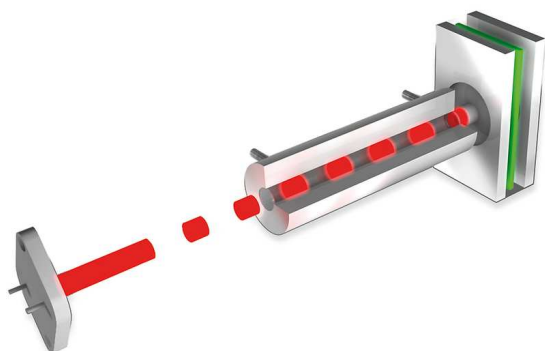

CELLA DI CONDUCIBILITÀ TERMICA AD ALTA SENSIBILITÀ

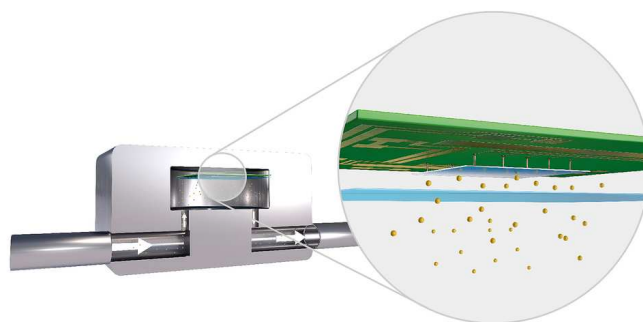

ANALIZZATORE OSSIGENO / IDROGENO ELEMENTRAC OH-P

SOLUZIONI STANDARD INTEGRATE

Le sostanze chimiche e i filtri necessari per il funzionamento dell'analizzatore elementare ELEMENTRAC OH-p sono comodamente disposti sul pannello frontale e possono essere nascosti dietro uno sportello rimovibile durante il normale funzionamento. Questa disposizione riduce notevolmente il tempo necessario per la manutenzione e aumenta la facilità d'uso. Inoltre, alcuni dettagli innovativi migliorano notevolmente la riproducibilità delle analisi.

Porta di campionamento innovativa e lavaggio pulsato della camera

La nuova porta di campionamento dell'analizzatore elementare OH-p garantisce un funzionamento confortevole e valori riproducibili. I campioni di forme diverse come pezzi solidi, granuli o polveri in capsule possono essere applicati fino a un peso di 2000 mg e vengono rapidamente liberati dall'atmosfera circostante con l'aiuto del flusso di gas di trasporto pulsato nella porta del campione. Quindi cadono verticalmente nel crogiolo di grafite preriscaldato per l'analisi.



- | Robusto contro lo sviluppo di polvere
- | Non è richiesta la chiusura delle capsule
- | Applicazione diretta fino a 2000 mg di granulato
- | Bassi livelli di manutenzione e usura

Gestione chiusa del gas

La serie degli analizzatori elementari ELEMENTRAC ONH utilizza un sistema chiuso di gas in sovrappressione. Ciò garantisce che il 100% del gas rilasciato dal campione venga immesso nei rilevatori, garantendo bassi limiti di rilevazione e un'ottima riproducibilità.

ANALIZZATORE OSSIGENO / IDROGENO ELEMENTRAC OH-P

OPZIONI

Oltre alle soluzioni integrate dell'analizzatore elementare ELEMENTRAC OH-p, sono disponibili ulteriori opzioni per aumentare l'efficienza ed estendere la gamma di applicazioni.

Autocleaner (Pulitore automatico)

Fondendo il campione in un crogiolo di grafite a temperature fino a 3000°C si generano depositi sull'elettrodo superiore e nella camera del forno che possono influenzare negativamente la riproducibilità delle analisi di ONH.

Il nuovo Autocleaner opzionale rimuove in modo affidabile questi depositi, consentendo un'analisi elementare precisa anche per portate elevate. Inoltre, per l'analizzatore elementare è disponibile un efficiente forno di taratura e pulizia del gas per un'accurata pre-pulizia del gas di trasporto.



Il software ELEMENTS, basato sul sistema operativo di Windows, è un accessorio essenziale per tutti gli analizzatori elementari di generazione ELEMENTRAC.


La schermata centrale (analisi e risultati) è il punto di partenza da cui si accede facilmente a tutte le funzionalità richieste per la routine quotidiana. Da tale schermata è possibile raggruppare ed esportare i campioni analizzati o registrare ed analizzare nuovi campioni. L'utente può inoltre attivare varie funzionalità subordinate come la calibrazione, la diagnosi o lo stato e le modifiche all'impostazione dell'applicazione.



IOT - INTERNET OF THINGS

THE PLATFORM FOR REMOTE ACCESS TO YOUR DEVICES

Tutti gli analizzatori ELTRA si integrano perfettamente con la piattaforma IoT di Verder Scientific, fornendo funzionalità avanzate, connettività continua e ulteriori vantaggi:

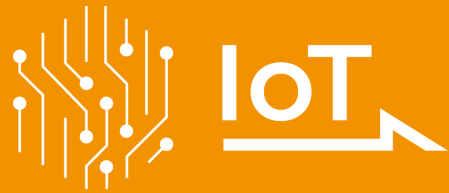

- | **Monitoraggio in tempo reale:** Ottenete una visione dello stato delle vostre macchine in qualsiasi momento grazie all'accesso immediato a dati importanti.
- | **Notifiche in tempo reale:** Rimanete aggiornati sullo stato dei vostri dispositivi con notifiche istantanee.
- | **Backup senza sforzo:** eseguite il backup dei dati in modo semplice e riducete al minimo i tempi di inattività, sia su singoli che su molteplici dispositivi.
- | **Aggiornamenti software automatici:** Verder Scientific IoT mantiene aggiornato il software del dispositivo, ottimizzando le prestazioni e l'affidabilità.
- | **Accesso ai dati di analisi:** Gli analizzatori ELTRA offrono accesso remoto ai dati di analisi. Ciò consente di accedere comodamente ai dati importanti anche quando si è in viaggio.
- | **Efficienza del caricatore automatico:** Ottenete il massimo dalla preparazione delle analisi in remoto con la nostra funzione di autoloader, che garantisce un funzionamento ininterrotto e una maggiore produttività per tutti gli strumenti che ne sono dotati.

Provate oggi stesso la potenza della piattaforma IoT di Verder Scientific e sbloccate il pieno potenziale dei vostri analizzatori ELTRA!




**FREE SOFTWARE
DOWNLOAD**

ANALIZZATORE OSSIGENO / IDROGENO ELEMENTRAC OH-P

CAMPIONI TIPICI

leghe, alluminio, ceneri, carburanti, ghisa, rame, Ferroleghie, ferro, metalli, minerale, metalli refrattari , silicone, acciaio, ...

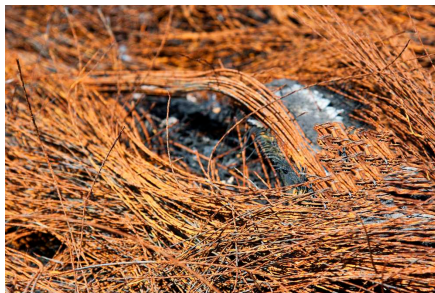

ANALIZZATORE OSSIGENO / IDROGENO ELEMENTRAC OH-P

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il principio di misurazione dell'analizzatore elementare ELEMENTRAC OH-p consente un ampio intervallo d'analisi. Il campione viene pesato e posizionato sulla porta del campione. Il lavaggio con gas di trasporto impedisce al gas atmosferico (ossigeno) di entrare nel forno.

Il crogiolo di grafite viene degassato nel forno a impulsi dell'analizzatore per ridurre possibili contaminazioni (es. Idrogeno residuo). Dopo una fase di stabilizzazione il campione viene lasciato cadere nel crogiolo e si scioglie. Il monossido di carbonio viene prodotto dalla reazione del carbonio nel crogiolo di grafite con l'ossigeno del materiale. L'idrogeno viene rilasciato nella sua forma elementare. Il gas di trasporto (azoto) e i gas del campione passano attraverso un filtro prima di entrare nel reagente Schuetze che converte la CO in CO₂, mentre l'idrogeno rimane nella sua forma elementare.

La CO₂ viene misurata dalle celle a infrarossi e rimossa chimicamente. Successivamente il contenuto di idrogeno viene determinato nella cella di conducibilità termica.

ANALIZZATORE OSSIGENO / IDROGENO ELEMENTRAC OH-P

DATI TECNICI

Elementi misurati	idrogeno, ossigeno
Campioni	inorganici
Allineamento fornace	verticale
Contenitore per campione	crogioli in grafite
Campo di applicazione	acciaio/metallurgico, ceramiche, engineering / elettronico
Fornace	elettrodi fornace ad impulsi (max 8,5 KW*, temperatura oltre 3,000°C
Metodo di rivelazione	conduttività termica per idrogeno, stato solido assorbimento infrarossi per ossigeno
Tipico tempo di analisi	120 - 180 s
Reagenti richiesti	Magnesio perclorato, idrossido di sodio, reagente Schuetze
Gas Richiesti	aria compressa, azoto 99.995 % puro, tutti i gas con (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)
Requisiti di alimentazione	3~ 400 V, 50/60 Hz, max. 8,500 W
Dimensioni (L x A x P)	56 x 78 x 64 cm
Peso	~ 165 kg
Attrezzatura richiesta	PC, monitor, bilancia (risoluzione 0.0001g)
Accessori opzionali	chiller esterno, purificazione gas di trasporto, unità calibrazione gas
-	* limitata a 6,8 kW

www.eltra.com/ohp2

ARTICOLI

ELEMENTRAC OH-P 2

(Si prega di ordinare separatamente PC, monitor, bilancia e materiali di consumo (kit di base, anidrone, idrossido di sodio, reagente schuetze))

**Range di misura con campione di peso 1.000 mg
(ulteriori combinazioni di range sono disponibili su
richiesta)**

2)

88200-2207  OH-p 2 2xH 0.08 ppm – 0.25 % H

88200-2209  OH-p 2 1xO 0.04 ppm – 0.04 % O
+ 2xH 0.08 ppm – 0.25 % H

88200-2210  OH-p 2 2xO 0.04 ppm – 1 % O
+ 2xH 0.08 ppm – 0.25 % H

ACCESSORI RICHIESTI

PC, MONITOR, BILANCIA

71015-1000 Computer con processore Intel Core i5-8400, 256 GB SSD; 8 GB RAM; Sistema operativo Windows 10; tastiera; mouse

88400-0584 Monitor, TFT (23.8")

88400-0645 Bilancia (risoluzione 0.0001 g)

MATERIALI DI CONSUMO / PRODOTTI CHIMICI NECESSARI PER LE PRIME OPERAZIONI

88500-0019 OH-Starter-kit per 500 analisi
(400 crogioli in grafite, 50 crogioli esterni in grafite, 200 crogioli interni in grafite, 50 g di lana di vetro)

90200  Anidrone (magnesio perclorato), 454 g 1)

90210  Idrossido di sodio, 500 g 1)

90270  Reagente Schuetze, 100 g, for OH-p and ONH-p 1)

90289  Ossido di rame II, 100 g, for ON-p and ONH-p 1)

88600-0021 Filo di ossido di rame (per il precedente analizzatore ONH 2000) 1)

ULTERIORI OPZIONI E MATERIALI DI CONSUMO

ACCESSORI (HARDWARE)

88200-2400	ONH-p Autoloader (incl. autocleaner and vacuum cleaner)
88200-2401	ONH-p Autocleaner (incl. vacuum cleaner)
88400-0467	Chiller (SMC, 5900 W)
27000-2021	Unità di taratura gas serie ELEMENTRAC (per taratura idrogeno)
88200-9000	Forno di purificazione del gas di trasporto, senza riempimento (ordinare separatamente il riempimento e la lana di quarzo)
72080	Regolatore di azoto, 1 pezzo
72081	Regolatore di pressione, 1 pezzo
88400-0610	Scanner di codici a barre

CROGIOLI

88400-0471	Graphite crucibles, 400 pieces (recommended for autoloader operation)
90190	 Crogioli in grafite, 400 pezzi (per analisi rame, ottone e acciaio)
90180	 Crogioli interni in grafite, 100 pezzi (richiede crogiolo esterno in grafite 90185)
90185	 Crogioli esterni in grafite, 50 pezzi

SUPPORTI CROGIOLO

31360	 Punta in grafite, 1 pezzo (per crogioli 90190 e 90185)
-------	--

CAPSULE (NECESSARIE PER QUALSIASI TIPO DI ANALISI DELLE POLVERI)

90257	 Capsule di nichel, 3,2 x 7 mm, 100 pezzi
90256	 Capsule di nichel, 4,5 x 10 mm, 250 pezzi

88400-0066



Capsule di nichel, pressate, 12,5 x 5 mm, 100 pezzi

90252



Capsule di latta, 5 x 18 mm, 100 pezzi

BASKETS (CESTELLI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DELL'OSSIGENO E DELL'AZOTO NEI REFRATTARI)

90250



Nickel baskets, 100 pezzi, 1 g ciascuno

88600-0012



Nickel baskets, elevata purezza (basso contenuto di ossigeno), 100 pezzi, 1 g ciascuno

FLUSSI (RICHIESTI PER ALCUNE APPLICAZIONI)

90251



Pellet di stagno, 454 g (per la determinazione dell'idrogeno nel titanio)

90800



Grafite, 50 g (migliora la determinazione dell'ossigeno)

90258



Acceleratore di nichel, 100 g (per analisi di elevate quantità di refrattari)

PRODOTTI CHIMICI (RIEMPIMENTI PER TUBI DI VETRO E QUARZO)

88600-0028

Eltrasorb, 500g (black coloured sodium hydroxide)

90200



Anidrone (magnesio perclorato), 454 g l)

90210



Idrossido di sodio, 500 g

90270



Reagente Schuetze, 100 g, for OH-p and ONH-p

90331



Lana di vetro, 454 g

90332



Lana di vetro, 50 g

92610



Tubetto di grasso per alto vuoto, 35 g

ELEMENTRAC - UTENSILI AGGIUNTIVI

Tutti gli analizzatori ELEMENTRAC sono dotati di una serie di utensili necessari al corretto funzionamento. Il seguente elenco fornisce i numeri degli articoli per la sostituzione delle parti usurate e alcuni nuovi utensili per migliorare la maneggevolezza dello strumento.

SPATOLE E PINZETTE

88400-0476		Micro spatola, 1 pezzo, Misura XS
23110		Spatola, 1 pezzo, Misura M
23111		Spatola, 1 pezzo, Misura L
88400-0475		Set con 6 spatole e 1 pinzetta, per più procedure di pesatura
88400-0229		Pinzette (160 mm), curve, 1 pezzo, per il trasporto di pins e baskets
88400-0472		Pinzette (145 mm), rette, 1 pezzo, per la rimozione dei campioni dal forno ONH-p
88400-0213		Pinze per crogioli, 1 pezzo, per posizionare i crogioli sulla punta dell'elettrodo

STRUMENTI PER LO STOCCAGGIO, IL TRASPORTO E LA PESATURA

88400-0477		Navicella di pesatura, 1 pezzo, per la pesatura e l'utilizzo di granulati
36121		Navicella in quarzo, 74x22x10 mm, 1 pezzo, per la pesata dei pins

UTENSILI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

27000-8007		O-ring set ONH-p (furnace)
27000-8008		Maintenance kit ONH-p
27000-8009		O-ring set ONH-p
71010		Spazzola, 16 mm, 1 pezzo, per la pulizia della bilancia dalla polvere

88400-0500		Specchio telescopico, 1 pezzo, per l'ispezione dell'elettrodo superiore di ONH-p / ONH-2000
88400-0473		Imbuto per polveri (plastica), 1 pezzo, per un facile riempimento di tubi chimici
88400-0489		Tappo in gomma 14x20x24 mm, 1 pezzo, per sigillare piccoli tubi di vetro come 88400-0006
88600-0027		Sodium hydroxide, Anhydron filter tube
71032		Pennello composito, 1 pezzo, per la pulizia dell'elettrodo superiore del forno ONH-p
71035		Spazzola per pulizia / spazzola per forno, 1 pezzo, per la pulizia dell'ingresso del campione nei forni ONH
71031		Spazzola metallica, 1 pezzo, per pulire la punta in grafite e il suo supporto
88400-0504		Spazzola cilindrica, ottone, per la pulizia intensiva del forno inferiore
88400-0501		Micro spazzola, 1 pezzo, per la pulizia del tubo di uscita dei forni della serie ONH
61030		Chiave a brugola, 3 mm, 1 pezzo
61040		Chiave a brugola, 4 mm, 1 pezzo
61050		Chiave a brugola, 5 mm, 1 pezzo

MATERIALI PER LA CALIBRAZIONE

I materiali di calibrazione possono presentare lievi variazioni a seconda del lotto corrente. Per vedere l'attuale certificazione visitare il sito www.ELTRA.com.

OSSIGENO E AZOTO IN ACCIAIO, PINS

91100-1001		Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, 25 – 40 ppm N
91100-1002		Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, 30 – 70 ppm N
91100-1003		Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, 150 – 250 ppm N
91100-1005		Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, 300 – 600 ppm N

91100-1007	Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, 70 – 130 ppm N
91100-1010	Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, >1000 ppm N
91100-1011	Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, 600-1000 ppm N

IDROGENO IN ACCIAIO, PINS

91400-1001		Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, 0.5 – 1 ppm H
------------	---	--

91400-1002		Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, 1.5 – 4 ppm H
------------	---	--

ACCIAIO, SFERE (H)

91110		Acciaio, 100 sfere, placcate in oro, 1 g ciascuna, >1.9 ppm H
-------	---	---

OSSIGENO IN RAME, PINS

91000-1003		Rame, 100 pins, 1 g ciascuno, ~200 ppm O
------------	--	--

91000-1004		Rame, 100 pins, 1 g ciascuno, ~10 ppm O
------------	---	---

OSSIGENO, AZOTO E IDROGENO IN TITANIO, PINS

91205-1001		Titanio, 100 pins, 0.1 g ciascuno, 10 – 35 ppm H
------------	---	--

91205-1002		Titanio, 100 pins, 0.1 g ciascuno, 20 – 70 ppm H
------------	---	--

91205-1003		Titanio, 100 pins, 0.1 g ciascuno, 30 – 90 ppm H
------------	---	--

91205-1004		Titanio, 100 pins, 0.1 g ciascuno, 60 – 120 ppm H
------------	---	---

91205-1005		Titanio, 100 pins, 0.1 g ciascuno, 150 – 250 ppm H
------------	---	--

91205-1006		Titanio, 100 pins, 0.1 g ciascuno, 120 – 150 ppm H
------------	--	--

IDROGENO E CARBONIO IN TITANIO, PINS (250 MG)

91305-1001	Titano, 100 pins, 0.25 g ciascuno, < 50 ppm H
91305-1002	Titano, 100 pins, 0.25 g ciascuno, 50 -100 ppm H
91305-1003	Titano, 100 pins, 0.25 g ciascuno, > 100 ppm H

Nota: ogni analizzatore richiede PC, monitor, bilancia e alcuni materiali di consumo (crogioli, prodotti chimici) che devono essere ordinati separatamente